

FAUTEUIL DE REPOS

MERCATO



MANUEL D'UTILISATION

INTRODUCTION :

Ce fauteuil est conçu pour apporter un confort maximum. Il est équipé d'un repose jambes très simple à manœuvrer.

Veuillez lire cette notice avec soin afin de tirer le meilleur parti de ce fauteuil.

Ce manuel doit être tenu à disposition pour un usage ultérieur après la première lecture.

SOMMAIRE

| | |
|----------------------------|------|
| 1 SECURITE | p. 2 |
| 2 CARACTERISTIQUES..... | p. 3 |
| 3 ASSEMBLAGE..... | p. 3 |
| 4 ENTRETIEN STOCKAGE | p. 4 |

1. SECURITE :

Attention

- Le fauteuil doit être assemblé correctement selon les instructions décrites ici. Le fabricant, ses agents et distributeurs ne sont pas responsables des dommages causés par un mauvais assemblage du fauteuil.
- Le fauteuil doit être placé sur un sol plat.
- Ne pas utiliser le fauteuil dans un environnement humide ou poussiéreux. Il doit être utilisé dans une pièce sèche.
- Ne pas placer le fauteuil près des radiateurs, poêles ou autre source de chaleur. Éviter l'exposition en continu au rayonnement du soleil.
- Ne pas utiliser le fauteuil à l'extérieur.
- Ne pas se reposer ou placez un objet lourd sur l'accoudoir, repose-pieds, ou le dossier du fauteuil.
- Ne pas sauter ou jouer sur le fauteuil.
- Ne pas mettre les doigts ou mains entre le siège et le repose jambes, quand le fauteuil est incliné ou lorsque celui-ci est en cours de manœuvre.
- Ce fauteuil doit être utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ce fauteuil n'est pas à usage professionnel.
- Le fabricant, ses agents et distributeurs ne sont pas responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation et d'abus de ce fauteuil.

Attention

Utiliser le fauteuil dans une pièce à température modérée, ne pas augmenter la température brusquement. Il est recommandé d'augmenter la température de manière graduelle jusqu'à un niveau normal.

Vérifier l'état du revêtement régulièrement.


2. CARACTERISTIQUES :


| | |
|------------------------------|--|
| Poids : | Poids du fauteuil = 43 kg La charge maximale = 120 kg |
| Dimensions de l'assise : | Profondeur = 52 cm, largeur = 51 cm, hauteur = 48 cm |
| Dimension hors tout : | Longueur = 105/154 cm, largeur = 65 cm, hauteur = 90/88 cm |
| Matière de l'habillage : | P.U – PVC - Polyester selon la version. |
| Composition du remplissage : | Mousse en P.U et fibre polyester |
| Châssis : | Bois |

3. ASSEMBLAGE :

Le fauteuil est emballé dans 1 carton. Le dossier et le siège doivent être assemblés selon les instructions données ci-après.

Remarque : Ne pas assembler le fauteuil si le rembourrage ou des parties du fauteuil sont endommagés. Vérifiez soigneusement toutes les pièces avant d'assembler le fauteuil. En cas de problème, contacter le vendeur.

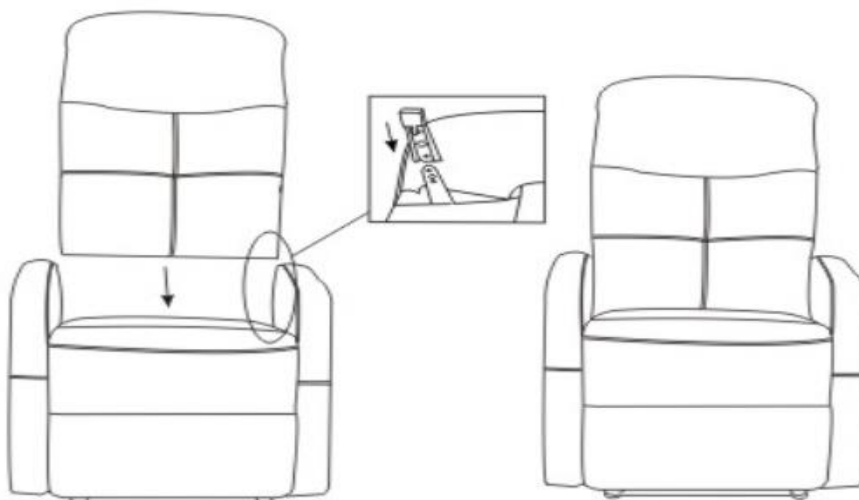

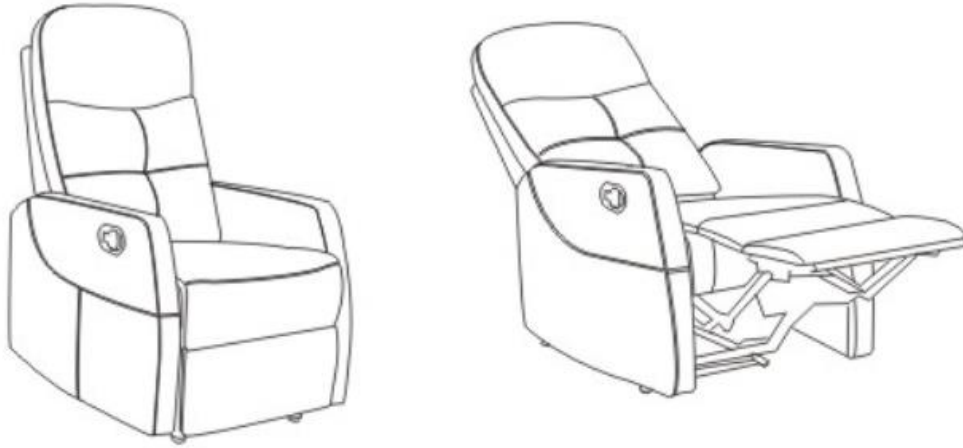

Attention:

- S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle devant et derrière le fauteuil avant opération.
- Ne pas insérer de doigts ou d'objets entre le fauteuil et le repose-pied.

4 . CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Nettoyer avec une éponge humide si le revêtement est en PU ou PVC, et avec un détachant pour tissu si le revêtement est en tissu.
- Garder le fauteuil propre et dépoussiéré, éloigné de l'humidité.
- Si le fauteuil n'est pas utilisé pendant une longue durée, le couvrir d'un tissu propre pour le protéger de la poussière. Conserver le dans un local sec.
- Ne pas stocker le fauteuil en plein soleil ou dans des lieux à hautes températures. Cela peut entraîner la décoloration du tissu.

IDENTITES

Rue de la Forgerie - ZA Pôle 49 - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - www.identites.eu