

MATELAS MASSAGE DU CORPS

Référence 861078



Fiche technique

Description : corps par vibrations. Il dispose de la fonction chauffante indépendant pour vous décontracter plus facilement. 2 zones de chauffage, 3 niveaux d'intensité de massage avec 4 zones de massage (nuque – haut du dos – bas du dos – jambes). Capitonné de mousse pour votre confort/ Fonctionne sur secteur.

Descriptif technique :

- 10 moteurs
- 5 modes préprogrammés
- 3 niveaux d'intensité de massage
- 4 zones de massage (nuque/haut du dos/bas du dos/jambes)
- 2 zones de chauffe
- Arrêt automatique après 15 minutes
- Fonctionne avec un branchement sur secteur

Dimensions : Long. 165 x larg. 43 cm.

Garantie : 2 ans

Normes : CE

Poids : 2,8 kg

Notice d'utilisation

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre coussin masse pieds, en particuliers celles-ci dessous :

- N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans le manuel.
- Avant d'utiliser l'appareil, pensez à retirer le sachet de silice permettant de lutter contre l'humidité de l'air.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées

d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant ou qui ne soient pas fournis avec cet appareil.
- Vérifiez que la tension de votre réseau corresponde à celle de l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
- Si le cordon de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon similaire disponible chez le fournisseur ou son service après vente.
- N'utilisez pas ce produit avec d'aller dormir. Le massage a un effet stimulant qui peut retarder le sommeil.
- N'utilisez pas cet appareil si la prise de courant est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé ou encore s'il est tombé dans l'eau. Faites alors examiner et réparer l'appareil auprès du fournisseur ou de son service après vente.
- Si une odeur anormal survient au cours de l'utilisation décrite dans le présent manuel, éteignez l'appareil, débranchez le et faites le examiner par le fournisseur ou son service après vente.
- Ne transportez pas cet appareil en le portant pas son cordon électrique et n'utilisez pas ce cordon comme poignée.
- Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer.
- Débranchez directement l'appareil s'il est tombé dans l'eau avant de le récupérer.
- Pour débrancher l'appareil, veuillez vous assurer que la touche « ON/OFF » soit bien désactivée avant de retirer la prise de courant.
- Ne branchez pas, ne débranchez pas la fiche électrique de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne démontez ni l'appareil dans son intégralité, ni même en partie.
- Un appareil électrique ne doit jamais rester brancher sans surveillance.
- Ne jamais utiliser cet appareil sous une couverture ou sous un coussin. Une chaleur excessive peut provoquer un incendie, l'électrocution de la personne ou des blessures.
- Ne laissez pas l'appareil exposé aux rayons du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est plié ou roulé.
- Ne placez pas cet appareil sur tout support possédant une surface blanche ou de couleur claire afin d'éviter tout transfert de couleur de ce matelas massant sur celle-ci.
- Si votre santé vous préoccupe, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais rien tomber ou n'insérez jamais aucun objet (punaise ou attache métallique) dans l'une des ouvertures de cet appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil sur une partie du corps qui est gonflée, enflammée ou en cas d'éruption cutanée.
- Ce produit est un appareil de massage non professionnel conçu pour apaiser les muscles fatigués N'utilisez pas cet appareil en remplacement de soins médicaux, il est destiné exclusivement à l'usage familiale.

Placement de l'appareil


- Le matelas massage du corps dispose d'un système de sangles qui vous permet de le fixer sur n'importe quelle chaise longue. Faites simplement passer les sangles de part et d'autre du dossier, réunissez les et fixez les l'une à l'autre à l'aide de la boucle en plastique. Vous pouvez également placer ce matelas massant sur votre divan ou votre canapé, votre lit ou, si

vous le désirez, à même le sol.

Télécommande

Descriptif de la télécommande :

- 1) Sélection ON/OFF
- 2) Sélection du mode préprogrammé de massage
- 3) Sélection du niveau d'intensité de massage
- 4) Sélection de la fonction chauffante
- 5) Affichage du niveau d'intensité de massage sélectionné
- 6) Affichage du mode préprogrammé du massage sélectionné
- 7) Sélection de la zone de massage : jambes
- 8) Sélection de la zone de massage : bas du dos
- 9) Sélection de la zone de massage : haut du dos
- 10) Sélection de la zone de massage : nuque

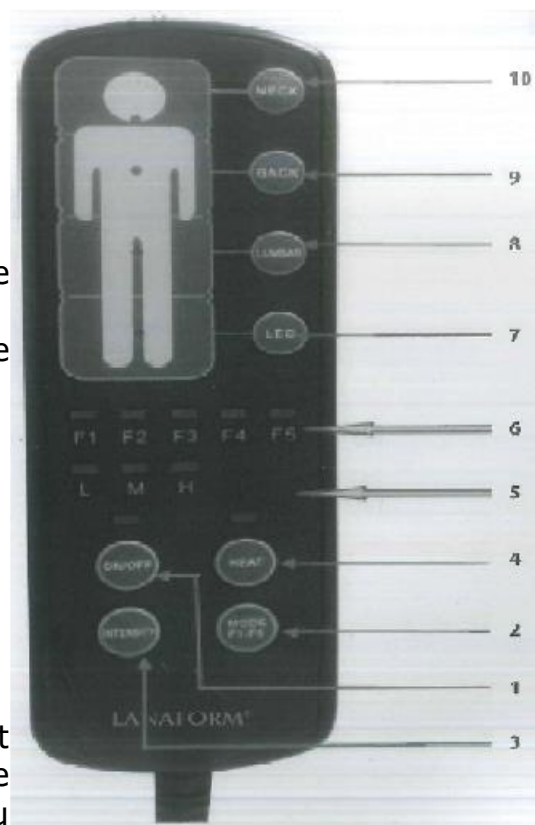

Utilisation du matelas massage du corps :

Le matelas s'utilise grâce à un transformateur. Reliez, tout d'abord, l'extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur femelle d'entrée situé sur le côté droit du matelas. Ensuite, branchez le transporteur dans une prise courant. Une fois connecté à la prise de courant, le matelas massant est prêt à être utilisé.

ON/OFF : La mise en marche ou l'arrêt de l'appareil se commande par simple pression sur le bouton ON/OFF (schéma télécommande, point 1),

Fonctionnement : Très simple d'utilisation, vous avez la possibilité de sélectionner :

- 1 mode préprogrammé de massage parmi les 5 modes proposés (schéma télécommande, point 2)
- 1 des 3 niveaux d'intensité de vibration (schéma télécommande, point 3)
- La fonction chauffante (schéma télécommande, point 4)
- 1 ou plusieurs des 4 zones de massage selon votre envie et/ou votre besoin (schéma télécommande, point 7, 8, 9, 10)

Entretien:

• Nettoyage :

Débranchez le matelas de la prise de courant et patientez quelques minutes avant de le nettoyer. Nettoyez le à l'aide d'une éponge douce et légèrement humide.

Ne laissez jamais de l'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec le matelas

Ne le plongez pas dans un liquide pour le nettoyer

N'utilisez jamais de détergents abrasifs, de brosses ou un diluant afin de le nettoyer.

• Rangement :

Placez le matelas massant dans sa boîte et dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

Évitez de le mettre en contact avec des bords tranchants et autres objets pointus qui pourrait couper ou percer sa surface en tissu.

Afin d'éviter toute rupture du câble électrique, n'enroule pas celui-ci autour du matelas.

Ne pendez pas le matelas par le cordon de commande manuelle ou le cordon d'alimentation.

Conseils relatifs à l'élimination des déchets

- L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune
- Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales. Retirez préalablement la pile et déposez la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée.