



WHILL Europe B.V.  
Johan Cruijff Boulevard 61,  
1101 DL, Amsterdam,  
Pays-Bas  
info@whill-europe.com  
www.whill.inc



**ERGO**  
CONCEPT

35, rue du Petit Bois - Bat. D  
+33 477 40 09 97  
69440 MORNANT

Vol 1.0

\*Cet appareil vise à fournir une mobilité aux personnes habituées à utiliser un fauteuil roulant électrique.

**ERGO**  
CONCEPT  
Distributeur officiel



# Move More. Live More.

Découvrez le monde avec WHILL et vivez une vie sans limites.

Des produits innovants conçus pour révolutionner la perception de ce que peut être un dispositif d'aide à la mobilité.

WHILL Model C2





## Commodité

Le Model C2 est simple à utiliser et peut effectuer des virages serrés pour vous emmener partout où vous voulez.



Le panier est idéalement situé sous le siège, ce qui facilite l'insertion et le retrait de vos articles.  
Dimensions : 24 cm x 29 cm x 43 cm



Soulevez l'accoudoir pour vous asseoir aisément sur le siège par le côté. Tenez-vous debout sur le repose-pied pour plus de stabilité.



Vivez l'aventure avec WHILL — le Model C2 peut effectuer des virages serrés, vous permettant d'aller dans des endroits où un scooter standard ne pourra pas vous emmener.



Mettez l'appareil sous tension et ajustez la vitesse d'une seule main. L'appareil freine automatiquement lorsque vous relâchez le contrôleur, même en pente.






## Puissant

Une puissance impressionnante qui vous permet d'en voir plus et vous offre une plus grande liberté. Vivez la vie à laquelle vous aspirez avec le WHILL Model C2.

Sortez et partez à l'aventure !



Grimpez sans effort sur des obstacles jusqu'à 5 cm de hauteur grâce à deux moteurs puissants et de grandes roues avant holonomes.

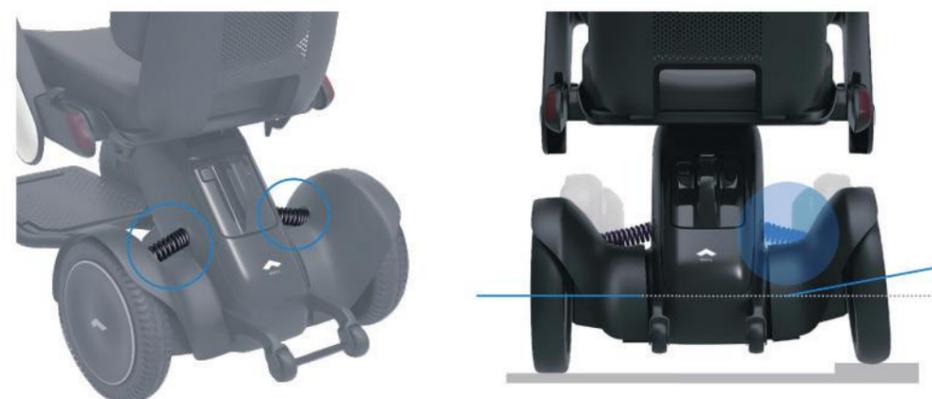

La suspension des roues arrière absorbe les chocs lors de la conduite sur des routes cahoteuses ou des obstacles.



Se démonte  
facilement pour  
entrer dans le coffre  
de votre voiture

\*L' image ci-dessus est fournie  
à titre indicatif uniquement

## Portable

Se démonte en quatre étapes simples.

Le Model C2 peut être démonté pour un transport facile dans le coffre de n'importe quelle voiture. Que vous fassiez du shopping le week-end ou que vous voyagiez avec votre famille, le Model C2 vous permet de vivre pleinement votre vie.



1  
Retirez la batterie.



2  
Soulevez le levier sous le siège.



3  
Soulevez le siège.



4  
Tirez le levier sur le côté de la batterie vers vous pour séparer les différentes parties.

Assemblage du siège  
12,9 kg

Base de traction avant  
17,6 kg

Base de propulsion arrière  
19,4 kg

Batterie  
2,7 kg



## Variation de couleur

Conduisez avec style.

Choisissez parmi 8 options de couleurs différentes d'accoudoir et personnalisez le Model C2 en fonction de votre style personnel.



Blanc



Gris\*



Noir



Rouge



Rose



Violet\*



Or

\*Couleur en édition limitée

## Nous avons pensé à tout !

Les commentaires de nos clients ont contribué à façonner le Model C2. Nous avons intégré toutes les fonctionnalités que vous recherchez, y compris un verrouillage à distance et la possibilité d'ajuster la vitesse maximale pour plus de sécurité.



Feu arrière

Le feu arrière est clairement visible même avec un sac suspendu au-dessus du dossier, vous offrant la sécurité sur la route la nuit.

Est conçu pour empêcher la dérive



Conduisez tout droit sur un chemin incliné.

Le contrôleur peut être positionné du côté gauche ou droit.



Batterie  
Batterie amovible.


5

heures de charge



Le Model C2 peut parcourir 18 km avec une charge de 5 heures, ce qui vous donne suffisamment de puissance pour votre utilisation tout au long de votre journée.

Application

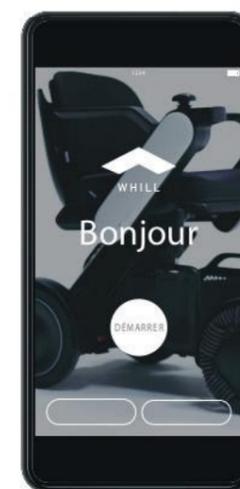


Vérifiez votre kilométrage total, la distance parcourue, le niveau de la batterie, les cycles de charge complets et plus encore avec l'application WHILL\*. Vous pouvez également verrouiller et déverrouiller l'appareil.

\*Vous devez installer l'application au préalable.




2,7 kg

La batterie peut être retirée et chargée sur une prise domestique ordinaire.

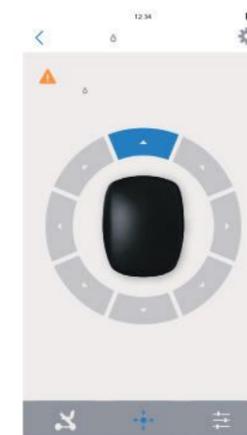



L'écran de contrôle intuitif vous permet de contrôler l'appareil à distance.

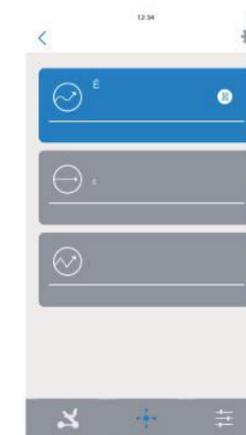

Réglez le mode de conduite sur « Eco », « Normal » ou « Sport » selon vos besoins.

## Raccord

Le Model C2 peut être facilement ajusté, de la hauteur du siège à l'angle du dossier en passant par la position du contrôleur (conduite à droite ou à gauche), afin d'offrir une expérience de conduite confortable.

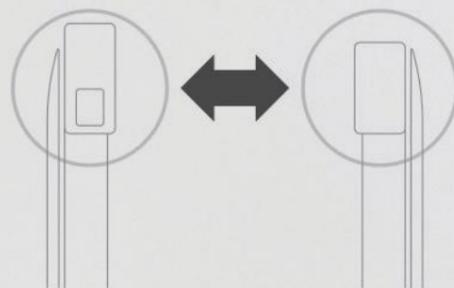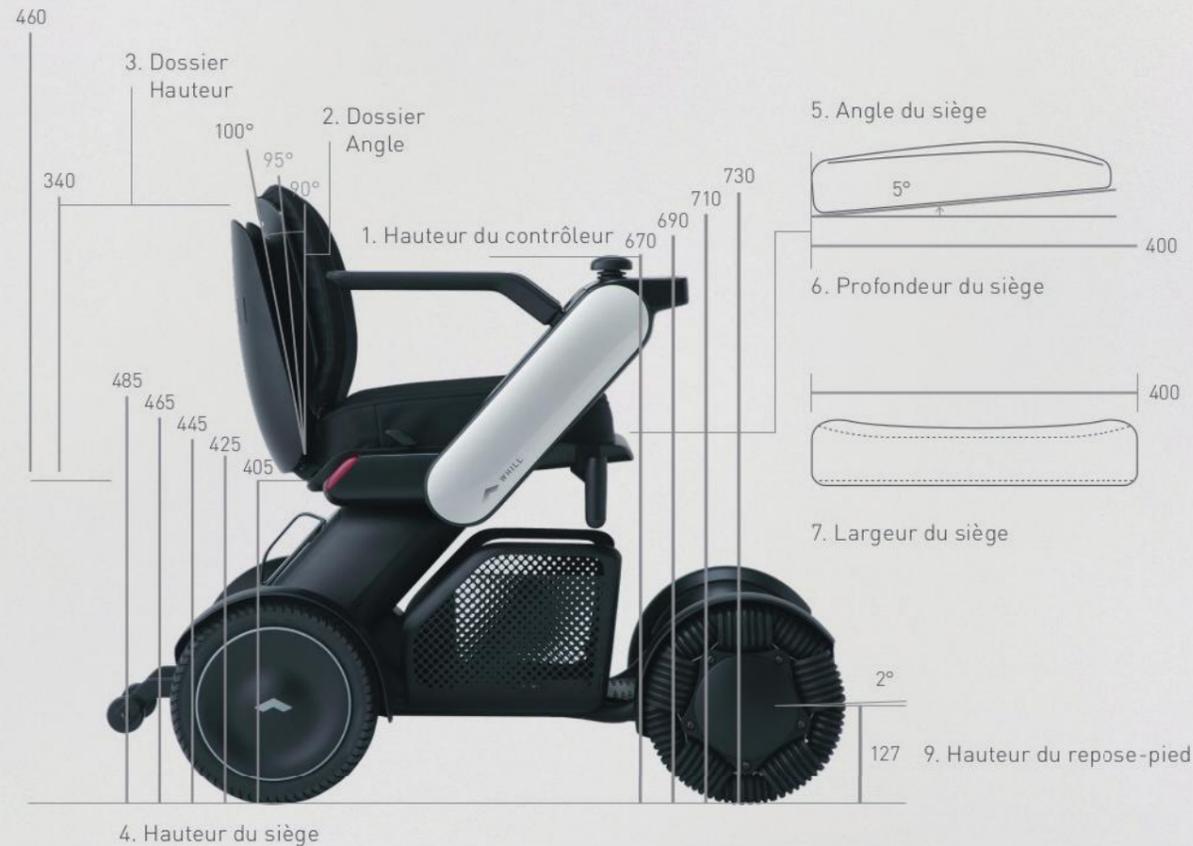

Le contrôleur peut être positionné du côté gauche ou droit.

- 1. Hauteur du contrôleur..... 670, 690, 710, 730 mm
- 2. Angle du dossier..... 90, 95, 100°
- 3. Hauteur du dossier..... 340 - 460 mm
- 4. Hauteur du siège .....405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Angle du siège ..... 5°
- 6. Profondeur du siège ..... 400 mm
- 7. Largeur du siège ..... 400 mm
- 8. Angle du support de pied ..... 2°
- 9. Hauteur du support de pied ..... 127 mm

Avertissement : Si vous utilisez votre propre coussin, pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'en utiliser un suffisamment ignifuge.

## Spécifications des performances

Autonomie de conduite .....	18 km
Vitesse maximale .....	6 km/h
Système d'entraînement.....	Système d'entraînement à 2 moteurs Système
Capacité d'inclinaison .....	10°
Rayon de braquage .....	760 mm
Marge de franchissement d'obstacles .....	50 mm
Garde au sol.....	57 mm
Système de freinage.....	électromagnétique
Capacité de poids maximum.....	136 kg
Longueur totale (repose-pieds inclus) : .....	985 mm
Largeur totale : .....	554 mm
Hauteur totale : .....	745 - 945 mm
Assemblage du siège	
Longueur : .....	570 mm
Largeur : .....	550, 600, 650 mm
Hauteur : .....	480 mm
Base de propulsion arrière	
Longueur : .....	590 mm
Largeur : .....	554 mm
Hauteur : .....	300 mm
Base de traction avant	
Longueur : .....	720 mm
Largeur : .....	554 mm
Hauteur : .....	270 mm
Type de roues avant : .....	Roues holonomes
Type de roues arrière : .....	Standard : Pneu sans air

### Autres spécifications

Temps de charge.....	5 heures
Batterie .....	au lithium-ion (25,3 V x 10,6 Ah)
Cycles de charge de la batterie ...	~1 000
Batterie Wh .....	269 Wh
Conditions de fonctionnement ....	-15 — 40 °C
Coussins de siège .....	400 mm x 400 mm 450 mm x 450 mm
Feux arrière .....	lampes LED (rouge)
Klaxon .....	Intégré, niveau sonore > 65 dB
Fauteuil roulant classe .....	A



\*N'utilisez pas l'appareil comme siège dans une voiture ou un autre véhicule.

\*L'appareil est adapté au transport terrestre et aérien s'il est inoccupé.

## Accessoires

Achetez des accessoires pour encore plus de commodité et de personnalisation.



### Caches

Vous pouvez modifier la couleur en achetant une couleur supplémentaire parmi les huit couleurs.

Paire gauche et droite.



### Ceinture ventrale

Stabilise fermement la position assise, même dans les pentes.



### Batterie

La batterie légère de 2,7 kg peut également être utilisée comme batterie de rechange.



### Chargeur de batterie

Un excellent complément à une batterie de rechange, il vous permet de passer d'une batterie complètement chargée à la prochaine batterie complètement chargée pour que vous puissiez rester en mouvement.



### Housse de protection

Elle protège l'appareil de la poussière et de la saleté lorsqu'il est stocké à l'extérieur\*.

\*Non étanche. Ne pas utiliser pour se protéger de la pluie.



### Porte-canne

Des cannes à poignée, cannes-béquilles ou béquilles peuvent être fixées à la partie principale.



### Joystick

Vous pouvez le faire fonctionner en le saisissant avec votre main ou en le faisant balancer entre vos doigts.



### Pochette latérale

Une pochette latérale pouvant être fixée à l'accoudoir. Vous pouvez y ranger vos effets personnels importants, comme votre smartphone et votre portefeuille, et les garder ainsi près de vous. La pochette renferme également une poche zippée.



### Coussin d'accoudoir

Un coussin rembourré pouvant être fixé à l'accoudoir. La hauteur de l'accoudoir peut être augmentée de 3 cm.



Move More.  
Live More.

