



DOSSERET



80 kg/m³

Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée multiportance




DESRIPTIF
Dossieret moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ multiportance

INDICATIONS
Amélioration du positionnement et du confort du patient dans son fauteuil. Prévention de l'instabilité sagittale (glisser-avant).

MODÈLES DISPONIBLES



Dossieret Viscoélastique multiportance

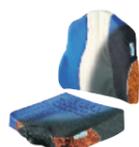

Packs thérapeutiques (voir page 44)



Dossieret HR

40 kg/m³

Mousse haute résilience

PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE *Plus d'infos p. 49*

P951D :



Avec housse(s) POLYMAILLE® **MAD** **COLL**
→ Enduction polyuréthane sur textile jersey

→ En regard de la zone dorsale, tissu de type enduction polyuréthane bi-extensible hautement respirante et imperméabilisée.

→ Tissu de type toile enduite souple, résistante à l'abrasion et aux contraintes d'une utilisation quotidienne intensive.

→ Tissu technique hautement résistant positionné en regard des zones à forte contrainte d'abrasion.

P952D :



Avec housse(s) POLYMAILLE® **MAD** **COLL**
→ Enduction polyuréthane sur textile jersey



SYSTÈME D'ACCROCHE UNIVERSELLE (P951D & P952D)
→ S'adapte à la plupart des modèles de fauteuil.

MODÈLE	TAILLE	REF	Hauteur	Largeur	Épaisseur (max)
Dossieret viscoélastique multiportance	Taille Small	P951DS1HW	44 cm	39 cm	9 cm
	Taille Standard	P951D1HW	49 cm	44 cm	9 cm
	Taille Large	P951DL1HW	49 cm	50 cm	10 cm
Dossieret haute résilience	Taille Standard	P952D1HW	49 cm	44 cm	9 cm

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

Entretien housses POLYMAILLE®



GARANTIE **2 ANS**



DOSSERET

DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE DU COUSSIN D'AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE

- Soulage de manière importante les points d'appuis de la zone vertébrale.
- Contribue à diminuer le risque d'apparition d'escarre sacro-coccygienne du fait d'une diminution de l'instabilité sagittale («glisser-avant»).
- Réduit les effets de cisaillements sur le plan sacro-fessier grâce à un meilleur maintien postural du bassin.



PRINCIPE DE MULTIPORTANCE


→ La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

ZONE BLANCHE :

Mousse blanche de portance moindre permet une libération des pics de pressions de la zone vertébrale et favorise la prise d'empreinte morphologique.

ZONE BLEUE :

Mousse bleue de portance supérieure permet la décharge des points d'appuis à risques et accentue la stabilité latérale.

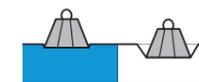


FORME ANATOMIQUE SPÉCIFIQUE

- Respecte la morphologie dorsale spécifique découlant d'une syphose (sillon vertébral).
- Respecte le creux lombaire, facteur important de la posture.

AUGMENTATION DU CONFORT DU PATIENT AU FAUTEUIL

- Excroissances latérales protégeant du contact direct des tubes de la zone axillaire/dorsale, souvent douloureuse, en particulier dans les cas d'utilisation intensive.

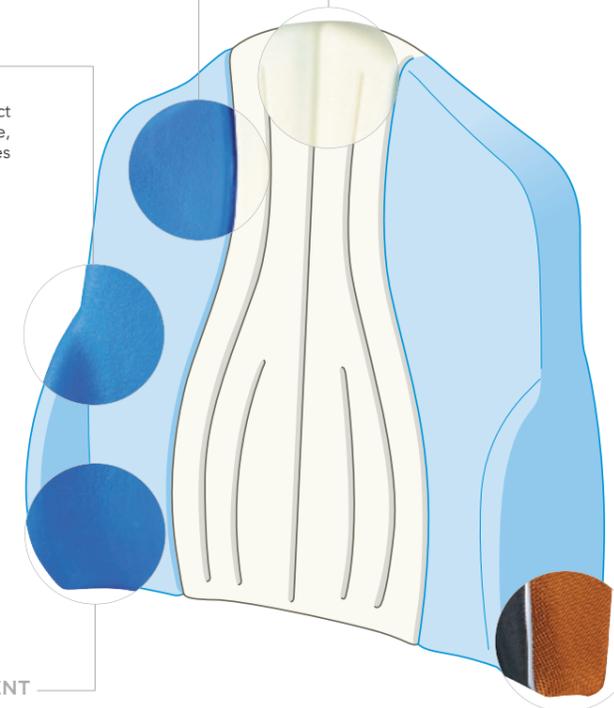

AMÉLIORATION DU POSITIONNEMENT ET DE LA STABILITÉ DU PATIENT

- Maintien de la zone du bassin permettant de prévenir le glisser-avant (instabilité sagittale) et le risque de chute, soucis permanent chez le sujet âgé, tant à domicile qu'en institution.
- Boudins latéraux assurant une diminution de l'instabilité latérale, fréquente chez les sujets handicapés.

HOUSSE SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE







SANS DOSSERET



AVEC UN DOSSERET SIMPLE MOUSSE



AVEC LE DOSSERET SYST'AM®

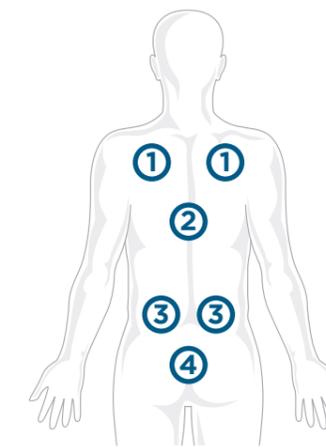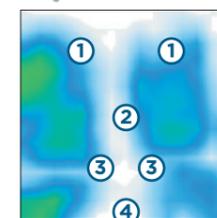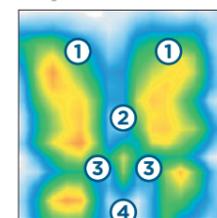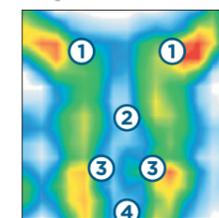

- 1 OMOPLATES/ÉPAULES
- 2 ZONE VERTÉBRALE
- 3 ZONE LOMBAIRE
- 4 ZONE SACRO-COCCYGIENNE




PACKS THÉRAPEUTIQUES FAUTEUIL SYST'AM®

REF	DÉSIGNATION				Taille du dossieret
PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX® Standard & Dossieret					
PKCOUDOS10	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	36 cm	36 cm	8 cm	Small (44 x 39 x 9 cm)
PKCOUDOS15	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	38 cm	38 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS11	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 cm	42 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS16	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 cm	46 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS12	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 cm	42 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS13	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 cm	46 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS14	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	51 cm	46 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX®+ (technique) avec Butée pelvienne & Dossieret					
PKCOUDOS01	Coussin VISCOFLEX®+ avec butée pelvienne + Dossieret	42 cm	42 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS02	Coussin VISCOFLEX®+ avec butée pelvienne + Dossieret	45 cm	42 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS03	Coussin VISCOFLEX®+ avec butée pelvienne + Dossieret	45 cm	46 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE
PACK THÉRAPEUTIQUE FAUTEUIL SUR-MESURE

→ Grâce au **conditionnement dorénavant unitaire de nos dossierets**, vous pouvez à présent aisément (en commandant les références coussins et dossierets séparément) composer votre **Pack Thérapeutique sur-mesure !**

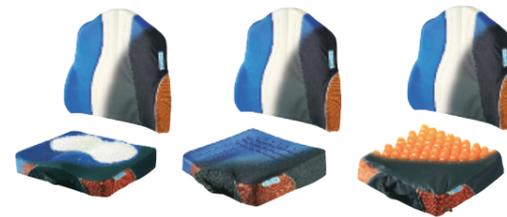

1

Vérifier les dimensions de l'assise de votre fauteuil

2

En déduire les dimensions maximales de votre coussin

3

Choisir le modèle de coussin souhaité aux bonnes dimensions grâce au tableau page suivante

4

Déterminer la taille du dossieret approprié

RECOMMANDATIONS

→ Prévoir une assise de profondeur + 3 cm si emploi d'un dossieret.

→ Toujours poser le dossieret sur le coussin



LARGEUR DU FAUTEUIL (cm)	TAILLES DE COUSSINS DISPONIBLES (largeur x profondeur en cm)	Correspondance TAILLE - MODÈLE DE COUSSIN							Compatibilité des tailles dossieret			
		POLYFORM® Mixte P314C	DUOFORM® P341C	VISCOFLEX® P361C (●)	VISCOFLEX®+ P361CA	VISCOFLEX®+ avec butée P361CP	POLYAIR® 60 P301C (●)	POLYAIR® AVEC OPTION CONFORT	DOSSERET Small P951DS1HW	DOSSERET Standard P951DI1HW	DOSSERET Large P951DL1HW	
30 / 32	32 x 32 cm				●					+		
34 / 36	36 x 36 cm		●	●	●			●		+	+	
38	38 x 38 cm			●	●					+	+	
	38 x 43 cm				●					+	+	
40	40 x 40 cm	●		●●	●			●●			+	
	40 x 43 cm							●●			+	
	40 x 46 cm							●●			+	
	42 x 42 cm		●	●●	●	●		●		+	+	+
	42 x 46 cm		●	●	●					+	+	
43 / 44	42 x 50 cm		●	●	●					+	+	
	43 x 43 cm							●●			+	+
	43 x 46 cm							●●			+	+
	45 x 42 cm		●	●●	●	●		●		+	+	+
	45 x 43 cm	●								+	+	
45	45 x 46 cm		●	●	●	●		●		+	+	+
	45 x 50 cm		●	●	●	●				+	+	+
	46 x 40 cm							●●			+	
	46 x 46 cm							●●			+	
	48 x 43 cm			●	●							+
48 / 50	51 x 46 cm		●	●	●			●●			+	
	51 x 50 cm			●	●			●●			+	
55	56 x 46 cm				●							
60	61 x 50 cm				●							